

RESPIRONICS

www.respironics.com

RESPIRONICS

Made For: Respiration
New Jersey, Inc.
5 Wood Hollow Road
Parsippany, NJ
07054 USA
Tel.: 1-724-387-4000
Fax: 1-724-387-5270
www.respironics.com

Respiration Deutschland
Gewerbestraße 17
82211 Herrsching
Germany
Tel.: +49 8152 93060
Fax: +49 8152 930618

CE
0123

Made in China
© 2008 Respiration, Inc. and its affiliates

U.S. Patent 4,854,574
1051689

Important: Training should be consistent and on-going. Record readings in the Therapy Diary.

Threshold™ PEP Positive Expiratory Pressure Device

ENGLISH Instructions for Use

For Single Patient Use Only.
Ref. HS735EU
Make sure there are no foreign objects in the mouthpiece or the device.

Threshold™ PEP Positive Expiratory Pressure Device

DEUTSCH Gebrauchsanweisung

Nur für den Gebrauch durch einen Patienten bestimmt.
Bestellnr. HS735EU
Auf Fremdkörper überprüfen im Mundstück befinden.

Threshold™ PEP Positive Expiratory Pressure Device

Français Mode d'emploi

Utilisation par un seul patient
N° de commande HS735EU
Merci de vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger dans la pièce buccale ou dans l'appareil.

Threshold™ PEP Positive Expiratory Pressure Device

ESPAÑOL Modo de empleo

Sólo para uso individual.
Referencia del artículo: HS735EU
Asegúrese que no existe ningún cuerpo extraño en el interior de la cámara que pueda bloquearla y retírelas si los hubiera.

Threshold™ PEP Positive Expiratory Pressure Device

ITALIANO Istruzioni per l'uso

Per uso individuale.
Numero d'ordine HS735EU
Ispezionare il dispositivo e il boccaglio e rimuovere qualsiasi oggetto estraneo.

Threshold™ PEP Positive Expiratory Pressure Device

NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing

Enkel bestemd voor het gebruik door één patiënt.
Bestellnr.: HS735EU
Verwittig U ervan dat er zich geen vreemde voorwerpen in het apparaatje of mondstuk bevinden.

Threshold™ PEP Positive Expiratory Pressure Device

SUOMI Käyttöohje

Henkilökohtaiseen käytöön
Tilausnumero HS735EU
Tarkista laitteen kunto.

Threshold™ PEP Positive Expiratory Pressure Device

SLOVENSKO Navodilo za uporabo

Uporaba je določena le za enega pacienta
Naročna št. HS735EU
Prekontroloval na pritomnosti drugih telies a pripadne ich odstrániť.

Threshold™ PEP Positive Expiratory Pressure Device

POLSKI Instrukcja obsługi

Przeznaczony do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.
Numer zamówienia HS735EU
Sprawdzić i usunąć wszystkie ciała obce.

Threshold™ PEP Positive Expiratory Pressure Device

MAGYAR Használati utasítás

Csak egy beteg használhatja.
Rendelésszám: HS735EU
Nézzé át a tartalyl, és távolítsa el belőle minden idegen anyagot vagy szennyeződést.

Threshold™ PEP Positive Expiratory Pressure Device

TÜRKÇE Kullanma Talimatı

Sadece bir hasta tarafından kullanılabilir.
Sipariş no. HS735EU
Cihazın içinde herhangi bir yabancı madde olup olmadığı bakın, varsa çıkarın.

Threshold™ PEP Positive Expiratory Pressure Device

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσεως

Για αποκλειστική χρήση από έναν μόνο ασθενή.
Αρ. παρ.: HS735EU
Ελέγχετε για πιθανά ξένα σώματα και αφαιρέστε τα.


Threshold™ PEP Positive Expiratory Pressure Device

طريقة الاستعمال

لاستعمال مريض واحد فقط.
رقم المنتج: HS735EU

ابحث عن أي شيء غريبة وتحلص منها.

Threshold™ PEP

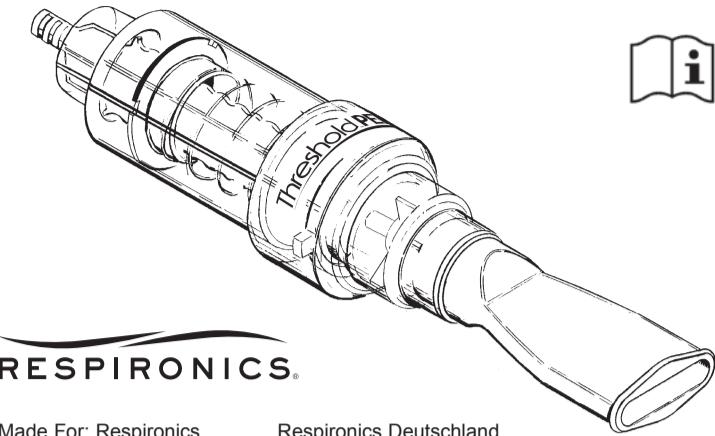

RESPIRONICS

Made For: Respiration
New Jersey, Inc.
5 Wood Hollow Road
Parsippany, NJ
07054 USA
Tel.: 1-724-387-4000
Fax: 1-724-387-5270
www.respironics.com

Respiration Deutschland
Gewerbestraße 17
82211 Herrsching
Germany
Tel.: +49 8152 93060
Fax: +49 8152 930618

CE
0123

Made in China
© 2008 Respiration, Inc. and its affiliates

U.S. Patent 4,854,574
1051689

Important: Training should be consistent and on-going. Record readings in the Therapy Diary.

1	جهاز ضغط الزفير الإيجابي (PEP) (القاسي)	المحتويات: جهاز ضغط الزفير الإيجابي (PEP) (القاسي) طريقة الاستعمال مقدمة العلاج	1- أداء مقبض التحكم (شكل 1-أ) لمحة الاحفاظ الحمراء لمؤشر الضغط (شكل 1-أ) (ب) مع الوضع الذي وصفه طبيبك، زيادة الرقام تعني زيادة المجهود، قم بتنبيه طرف الجهاز الذي يشبه المزمار بإحكام.	2- ضع مقبض الانف على أنفك ونفس من الفم.	3- اضغط الشفاه بقوّة حول طرف الجهاز الذي يشبه المزمار خذ شهيقاً كاملاً وأخرج نفراً أطول منه ضعفين أو ثلاثة أضعاف، واستمر على هذا النمط 10 - 20 مرة (شكل 3).	4- انزع طرف الجهاز الذي يشبه المزمار من الفم وأسفل بقوّة مرتين أو ثلاث.	5- أعد الخلوتين 3 و 4 حوالي أربع أو سنتة مرات أو إلى أن تمر من 20 - 25 دقيقة على العلاج حتى تتغير الإفرازات. يجب أن يتم العلاج من 2 إلى 4 مرات يومياً حسب الاحتياج أو على حسب ما يأمر به الطبيب.
---	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

