

Geräte-Übersicht 2021/22

Beatmungs-Therapie



Inhaltsübersicht

- 1 [Neuheiten & Updates](#)
- 2 [NIV Beatmungsgeräte](#)
- 3 [IV bis 16h Beatmungsgeräte](#)
- 4 [IV bis 24h Beatmungsgeräte](#)
- 5 [Highflow](#)
- 6 [Absaugung](#)
- 7 [Monitoring](#)
- 8 [Sekret-Management](#)
- 9 [Inhalation](#)
- 10 [Inhalation auch unter Beatmung](#)
- 11 [Aktive Befeuchtung](#)

1

Neuheiten & Updates

Vertikal



Beatmungsgerät Luisa in 2 Ausführungen:

Beatmungsgerät Luisa Kompl. 0402-0211

Hi-Flow Therapiegerät Luisa 0402-0212

Horizontal



2

NIV Beatmungsgeräte

NIV Therapiegeräte bei der Vitalaire

Geräteübersicht



prisma VENT30&40

0402-0165 - 14.24.09.2005 &
0402-0167 - 14.24.13.1002



Lumis 150

0402-0210 - 14.24.09.3005



Vivo 2

0402-0215 - 14.24.09.0046,

Löwenstein prisma VENT30&40

VA-Materialnummer prisma VENT 30: 0402-0165 Hilfsmittelnummer: 14.24.09.2005

VA-Materialnummer prisma VENT 40: 0402-0167 Hilfsmittelnummer: 14.24.13.1002

Besondere Merkmale:

- Großes Display, satte Kontraste, gestochene Schärfe und natürliche Farben.
- Passt auf fast alle Schläuche, versorgt Zusatzgeräte, funktioniert mit handelsüblichem Kabel.
- Flüsterleiser Betrieb, mehr Compliance und Wohlbefinden für Patienten und Umfeld.
- Intuitive Menüs, einfach Bedienung, schnelle Optimierung.

Reinigung & Pflege:

- Gerät & Atemschlauch wöchentlich reinigen.
- Monatlich Luftfilter reinigen und Pollenfilter ersetzen.
- Alle 6 Monate Luftfilter ersetzen.



Löwenstein prisma VENT30&40

VA-Materialnummer prisma VENT 30: 0402-0165 Hilfsmittelnummer: 14.24.09.2005

VA-Materialnummer prisma VENT 40: 0402-0167 Hilfsmittelnummer: 14.24.13.1002

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: max. 100 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 21,8x17,5x21,8 cm
- Gewicht: 2,4kg



ResMed Lumis 150 VPAP ST-A

VA-Materialnummer: 0402-0207
Hilfsmittelnummer: 14.24.09.0045



Besondere Merkmale:

- Das Lumis 150 VPAP ST-A Gerät ist indiziert für die Bereitstellung einer nicht-invasiven Beatmung bei Patienten mit einem Gewicht von über 13 kg bzw. über 30 kg im iVAPS-Modus, die an Ateminsuffizienz oder obstruktiver Schlafapnoe (OSA) leiden. Es ist für die Verwendung zu Hause und im Krankenhaus vorgesehen.

Reinigung & Pflege:

- Gerät & Atemschlauch wöchentlich reinigen.
- Alle 6 Monate Luftfilter ersetzen.

ResMed Lumis 150 VPAP ST-A

VA-Materialnummer: 0402-0207
Hilfsmittelnummer: 14.24.09.0045



Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: max. 104 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- CPAP, BiLevel ST, T, S, APCV, iVAPS

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 25,5x15x11,6 cm
- Gewicht: 1,3kg

Breas Vivo 2

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0402-0215
Hilfsmittelnummer: 14.24.09.0046

Besondere Merkmale:

- Die vielfältigen Modi und die umfangreichen Monitoring-Optionen ermöglichen eine hohe Flexibilität bei der Therapie von Atemwegserkrankungen.
- Optional integrierbarer Warmluftbefeuchter und beheizbares Schlauchsystem
- Reinigung & Pflege:
- Die Komponenten, die mit dem Patienten verbunden sind (inkl. Filter), müssen regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden, um die einwandfreie Funktion des Vivo 2 sicherzustellen.
- Lufteinlassfilter grau (grob) wöchentlich waschen, jährlich oder bei Patientenwechsel ersetzen.
- Lufteinlassfilter weiß (fein) vierwöchentlich oder bei Patientenwechsel ersetzen.

Reinigung & Pflege:

- Die Komponenten, die mit dem Patienten verbunden sind (inkl. Filter), müssen regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden, um die einwandfreie Funktion des Vivo 2 sicherzustellen.
- Lufteinlassfilter grau (grob) wöchentlich waschen, jährlich oder bei Patientenwechsel ersetzen.
- Lufteinlassfilter weiß (fein) vierwöchentlich oder bei Patientenwechsel ersetzen.



Breas Vivo 2

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0402-0215
Hilfsmittelnummer: 14.24.09.0046

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: max. 60 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- PSV, PCV, CPAP, S, S/T, T, TgV, Auto-EPAP

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 16,6x20x18,5 cm
- Gewicht: 1,6kg



3

IV Beatmungsgeräte bis 16 Stunden

IV Therapiegeräte bei der Vitalaire

Geräteübersicht



Stellar 130 & 150

0402-0120 - 14.24.13.2008

0402-0210 - 14.24.09.3005



prisma VENT50

0402-0186 - 14.24.13.4001



Vivo 3 & 45

0402-0214 - 14.24.13.2013 &

0402-0203 - 14.24.13.2011



Astral 100SC

0402-0193 - 14.24.13.5007

ResMed Stellar 150

VA-Materialnummer: 0402-0120
Hilfsmittelnummer: 14.24.13.2008

* 2 Stunden bei EPAP 5, IPAP 15, 20 AZ/min
** 8 Stunden pro Akku im APCV-Modus
(Assistiert kontrollierte
Beatmung) bei EPAP 5 cm H2O,
IPAP 15 cm H2O und 20 AZ/min



Besondere Merkmale:

- Umfassende Alarme – Benutzerdefinierbare und unveränderliche Alarme zur Sicherheit des Patienten.
- Mobilität – Interner Akku (2 Stunden Kapazität*), optionaler externer Akku (die ResMed Power Station II, 8 Stunden Kapazität**) und speziell angefertigte Transporttasche.
- Leicht, klein, leise – Stellar Beatmungsgeräte kombinieren einzigartige neue Merkmale mit Bewährtem und durchweg unkomplizierter Bedienung.

Reinigung & Pflege:

- Wischen Sie bei sichtbaren Verunreinigungen des Produkts täglich die Außenflächen des Produkts mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab.
- Waschen Sie den Atemschlauch wöchentlich in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
- Vergewissern Sie sich monatlich, dass der Luftfilter weder durch Schmutz blockiert ist noch Löcher aufweist

ResMed Stellar 150

VA-Materialnummer: 0402-0120
Hilfsmittelnummer: 14.24.13.2008

* 2 Stunden bei EPAP 5, IPAP 15, 20 AZ/min
** 8 Stunden pro Akku im APCV-Modus
(Assitiert kontrollierte
Beatmung) bei EPAP 5 cm H2O,
IPAP 15 cm H2O und 20 AZ/min



Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: max. 65 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- CPAP, S, S/T, T, APCV, iVAPS

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 17x23x12 cm
- Gewicht: 2,1kg

Löwenstein prisma VENT50

VA-Materialnummer: 0402-0186

Hilfsmittelnummer: 14.24.13.4001

Besondere Merkmale:

- Neben der Beatmung im Leckagesystem wie bei prisma VENT30 und prisma VENT40 möglichen ist es mit dem prisma VENT50 jetzt auch möglich, das Einschlauchsystem mit Patientenventil zu verwenden. Hinzu kommen ein noch größerer Druckbereich bis 50 hPa, druck- und volumenkontrollierte Mundstückbeatmungsmodi (MPVp und MPVv) und LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver) zur Hustenunterstützung und zum Sekretmanagement.

Reinigung & Pflege:

- Wöchentlich Gerät und Atemschlauch reinigen.
- Monatlich Luftfilter reinigen und Pollenfilter ersetzen.
- Alle 6 Monate Luftfilter ersetzen.



Löwenstein prisma VENT50

VA-Materialnummer: 0402-0186

Hilfsmittelnummer: 14.24.13.4001

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: max. 120 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV, MPVp, MPVv, LIAM

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 21,8x21,8x17,5 cm
- Gewicht: 2,5kg



Breas Vivo 3

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0402-0214
Hilfsmittelnummer: 14.24.13.2013



Besondere Merkmale:

- Die vielfältigen Modi und die umfangreichen Monitoring-Optionen ermöglichen eine hohe Flexibilität bei der Therapie von Atemwegserkrankungen.
- Optional integrierbarer Warmluftbefeuchter und beheizbares Schlauchsystem

Reinigung & Pflege:

- Die Komponenten, die mit dem Patienten verbunden sind (inkl. Filter), müssen regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden, um die einwandfreie Funktion des Vivo 2 sicherzustellen.
- Lufteinlassfilter grau (grob) wöchentlich waschen, jährlich oder bei Patientenwechsel ersetzen.
- Lufteinlassfilter weiß (fein) vierwöchentlich oder bei Patientenwechsel ersetzen.

Breas Vivo 3

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0402-0214
Hilfsmittelnummer: 14.24.13.2013



Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: max. 60 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- PSV, PCV, CPAP, S, S/T, T, TgV, Auto-EPAP

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 16,6x20x18,5 cm
- Gewicht: 1,8kg

Breas Vivo 45

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0402-0203
Hilfsmittelnummer: 14.24.13.2011

Besondere Merkmale:

- Vielfältige Therapieoptionen für ein breites Spektrum von Atemwegserkrankungen
- Klein, kompakt und anwenderfreundlich
- Integrierbarer Warmluftbefeuchter und beheizbare Schlauchsystem

Reinigung & Pflege:

- Tauschen Sie den waschbaren Patientenluftfilter und den Kühllufteinlassfilter mindestens einmal pro Jahr aus. Waschen Sie die Filter mindestens einmal wöchentlich.
- Erneuern Sie den Feinfilter mindestens einmal pro Monat bzw. bei hoher Luftverschmutzung oder pollenreicher Umgebung häufiger.



Breas Vivo 45

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0402-0203
Hilfsmittelnummer: 14.24.13.2011

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: max. 90 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- PSV, PSV(TgV), PCV, PCV(TgV), PCV(A), PCV(A+TgV), CPAP, Auto-EPAP

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 21,6x15,2x15,9 cm
- Gewicht: 2,4kg



ResMed Astral 100SC

VA-Materialnummer: 0402-0193
Hilfsmittelnummer: 14.24.13.5007



Besondere Merkmale:

- Das Astral Beatmungsgerät dient der Kurz- und Langzeitversorgung beatmungsabhängiger Patienten in der Klinik und im außerklinischen Bereich -praktisch und vielseitig mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten. Mit Astral wird Ihr Patient zuverlässig beatmet und überwacht und bleibt doch unabhängig und mobil.

Reinigung & Pflege:

- Alle 6 Monate Austausch des Lufteinlassfilters (bei Verschmutzung früher austauschen). Austausch des Adapters des Doppelschlauchsystems, sofern verwendet.

ResMed Astral 100SC

VA-Materialnummer: 0402-0193
Hilfsmittelnummer: 14.24.13.5007



Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: max. 120 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- CPAP, PSV, V(A)C, (A)PCV, P-SIMV, V-SIMV, ST, (A)PC

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 21,5x28,5x9,3 cm
- Gewicht: 3,2kg

4

IV Beatmungsgeräte bis 24 Stunden

IV Beatmungsgeräte bei der Vitalaire

Geräteübersicht



Luisa

0402-0211 - 14.24.12.3017



EO-150

0402-0199 - 14.24.12.3003



Vivo 45 LS

0402-0208 - 14.24.12.2009



Astral 100, 150

0402-0194 - 14.24.12.2003,
0402-0195 - 14.24.12.3008

Löwenstein Luisa

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0402-0211
Hilfsmittelnummer: 14.24.12.3017

Besondere Merkmale:

- LUISA lässt sich bequem über ein großes 10,1-ZOLL-Touchscreen bedienen. Intuitiv und unkompliziert.
- Eine Batterielaufzeit von bis zu 18 Stunden vergrößert den Aktionsradius der Anwender und gibt das gute Gefühl zusätzlicher Sicherheit.
- LUISA liefert Atemluft für ein aktives, mobiles Leben – und eröffnet ihren Nutzern dadurch ganz neue Möglichkeiten.

Reinigung & Pflege:

- Wöchentlich das Gerät reinigen
- Monatlich Grobstaubfilter & Kühlluftfilter reinigen und Feinfilter ersetzen
- Alle 6 Monate Grobstaubfilter ersetzen



Löwenstein Luisa

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0402-0211
Hilfsmittelnummer: 14.24.12.3017

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: max. 130 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- CPAP, S, ST, T, autoST, PSV, aPCV, PCV, P-SIMV, V-SIMV, MPVp, MPVv

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 30x21x13 cm
- Gewicht: 3,8kg



EOVE EO-150

VA-Materialnummer: 0402-0199
Hilfsmittelnummer: 14.24.12.3003

Besondere Merkmale:

- Das EO-150 von EOVE überzeugt durch sein einzigartiges Click & Go Konzept: Austauschbare und unabhängig von der Station zu betreibende Beatnungsmodule verringern das Gesamtgewicht und die Größe der Beatmungseinheit, die Mobilität der Patienten hingegen wird dadurch erheblich gesteigert. Auch die Übertragung des Patientenmodus und der Alarme auf Tablet-PC oder Smartphone vereinfacht die Mobilität und schafft so größtmögliche Freiräume für die Patienten.

Reinigung & Pflege:

- Luftfilter monatlich prüfen und Alle 6 Monate austauschen
- Wöchentlich Alarmtöne, Anschlüsse und Adapter überprüfen



EOVE EO-150

VA-Materialnummer: 0402-0199
Hilfsmittelnummer: 14.24.12.3003

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-230V, 47-63Hz
- Leistungsaufnahme: max. 115 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Anwendungsteil vom Typ BF

Betriebsmodi:

- (A)VCV, (A)PCV, PSV, MPV, MPP, PSV VT, V-SIMV, P-SIMV, CPAP, ST, (A)PC, ST VT, ST, C-FLOW

Maße:

- Docking-Station: 1,6kg, 25x21x13 cm
- Beatmungsmodul: 1,8kg, 24,5x14,5x10 cm



ResMed Astral

VA-Materialnummer Astral 100: 0402-0194

VA-Materialnummer Astral 150: 0402-0195

Hilfsmittelnummer: 14.24.12.2003

Hilfsmittelnummer: 14.24.12.3008

Besondere Merkmale:

- Das Astral Beatmungsgerät dient der Kurz- und Langzeitversorgung beatmungsabhängiger Patienten in der Klinik und im außerklinischen Bereich
- praktisch und vielseitig mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten.
- Mit Astral wird Ihr Patient zuverlässig beatmet und überwacht und bleibt doch unabhängig und mobil.

Reinigung & Pflege:

- Alle 6 Monate Austausch des Lufteinlassfilters (bei Verschmutzung früher austauschen). Austausch des Adapters des Doppelschlauchsysteams, sofern verwendet.



ResMed Astral

VA-Materialnummer Astral 100: 0402-0194
VA-Materialnummer Astral 150: 0402-0195

Hilfsmittelnummer: 14.24.12.2003
Hilfsmittelnummer: 14.24.12.3008

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: max. 120 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- CPAP, PSV, V(A)C, (A)PCV, P-SIMV, V-SIMV, ST, (A)PC

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 21,5x28,5x9,3 cm
- Gewicht: 3,2kg



Breas Vivo 45 LS

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0402-0208
Hilfsmittelnummer: 14.24.12.2009

Besondere Merkmale:

- Das Vivo 45 LS dient zur kontinuierlichen oder intermittierenden Beatmung für Kinder und Erwachsene ab 5 kg. Es kann sowohl für invasive als auch für nicht-invasive Beatmung verwendet werden.

Reinigung & Pflege:

- Feinfilter mindestens einmal pro Monat erneuern bzw. bei hoher Luftverschmutzung oder pollenreicher Umgebung häufiger.
- Patientenluftfilter und den Kühlluftreinlassfilter mindestens einmal pro Jahr auswechseln. Waschen Sie die Filter mindestens einmal wöchentlich.



Breas Vivo 45 LS

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0402-0208
Hilfsmittelnummer: 14.24.12.2009



Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Betriebstemperatur: 5 bis +40°C
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- PSV, PSV(TgV), PCV, PCV(TgV), PCV(A), PCV(A+TgV), CPAP, VCV, VCV(A), VCV-MPV, VCV-SIMV, PCV-SIMV, PCV-MPV

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 21,6x15,2x15,9 cm
- Gewicht: 2,4kg

5

Highflow

Highflow - Geräte bei der Vitalaire

Geräteübersicht



myAIRVO 2

7102-0001 - 14.24.08.0900



LM-Flow (in Anlage)

XXXX-XXXX - XX.XX.XX.XXXX



Luisa Hi-Flow

0402-0212 - 14.24.08.0900



EO-150 Hi-Flow

0402-0181 - 14.24.08.0900



Prisma VENT50-C

0402-0212 - 14.24.08.0900

F&P myAirvo 2

VA-Materialnummer: 7102-0001
Hilfsmittelnummer: 14.24.08.0900

Besondere Merkmale:

- Der myAIRVO 2 ist ein Atemgasbefeuchter mit integrierter Flowquelle, der hohe Flows von Luft/Sauerstoff-Gemischen über verschiedene Interfaces mit bis zu 60 L/min an spontan atmende Patienten abgibt.

Reinigung & Pflege:

- Täglich Trocknungsmodus aktivieren / Patienten-Interface und Wasserkammer ausspülen.
- Wöchentlich Patienten-Interface, Wasserkammer und Gerät reinigen.



F&P myAirvo 2

VA-Materialnummer: 7102-0001
Hilfsmittelnummer: 14.24.08.0900

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Flow: max. 60 L/min
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- Standard: 10-60L/min
- Junior: 2-25L/min

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 17x29,5x17,5 cm
- Gewicht: 2,2kg



Löwenstein LM-Flow

VA-Materialnummer: XXXX-XXXX
Hilfsmittelnummer: XX.XX.XX.XXXX



Besondere Merkmale:

- Der LM Flow zeichnet sich durch die intuitive Bedienoberfläche und die integrierte verbrauchsfreie Sauerstoffmessung aus. LM Flow stellt einen konstanten Flow zur Verfügung, der durch den integrierten Atemgasbefeuchter klimatisiert wird.
- Für Kinder: Flow: 2-25 L/min
 - Temperatur: 34 °C
 - O2: 21-100%
- Für Erwachsene: Flow: 10-80 L/min
 - Temperatur : 31 °C, 34°C, 37°C
 - O2: 21-100%

Reinigung & Pflege:

- Tägliche Reinigung: Schläuche, Nasenbrille, Wasserkammer. Schließen Sie das gesamte Schlauchsystem mit Nasenbrille an und aktivieren Sie den Trockenmodus. Entfernen Sie nach dem Trocknen die Wasserkammer und spülen Sie sie mit klarem Wasser.

Löwenstein LM-Flow

VA-Materialnummer: XXXX-XXXX
Hilfsmittelnummer: XX.XX.XX.XXXX



Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Flow: max. 80 L/min
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- Standard: 2-80L/min

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 30x16,5x19,7 cm
- Gewicht: 2,0kg

Löwenstein Luisa Hi-Flow

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0402-0212
Hilfsmittelnummer: 14.24.08.0900

Besondere Merkmale:

- LUISA lässt sich bequem über ein großes 10,1-ZOLL-Touchscreen bedienen. Intuitiv und unkompliziert.
- Eine Batterielaufzeit von bis zu 18 Stunden vergrößert den Aktionsradius der Anwender und gibt das gute Gefühl zusätzlicher Sicherheit.
- LUISA liefert Atemluft für ein aktives, mobiles Leben – und eröffnet ihren Nutzern dadurch ganz neue Möglichkeiten.

Reinigung & Pflege:

- Wöchentlich das Gerät reinigen
- Monatlich Grobstaubfilter & Kühlluftfilter reinigen und Feinfilter ersetzen
- Alle 6 Monate Grobstaubfilter ersetzen



Löwenstein Luisa Hi-Flow

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0402-0212
Hilfsmittelnummer: 14.24.08.0900

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: max. 130 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- CPAP, S, ST, T, autoST, PSV, aPCV, PCV, P-SIMV, V-SIMV, MPVp, MPVv, HFT

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 30x21x13 cm
- Gewicht: 3,8kg



EOVE EO-150 Hi-Flow

VA-Materialnummer: 0402-0181
Hilfsmittelnummer: 14.24.08.0900

Besondere Merkmale:

- Das EO-150 von EOVE überzeugt durch sein einzigartiges Click & Go Konzept: Austauschbare und unabhängig von der Station zu betreibende Beatnungsmodule verringern das Gesamtgewicht und die Größe der Beatmungseinheit, die Mobilität der Patienten hingegen wird dadurch erheblich gesteigert. Auch die Übertragung des Patientenmodus und der Alarme auf Tablet-PC oder Smartphone vereinfacht die Mobilität und schafft so größtmögliche Freiräume für die Patienten.

Reinigung & Pflege:

- Luftfilter monatlich prüfen und Alle 6 Monate austauschen
- Wöchentlich Alarmtöne, Anschlüsse und Adapter überprüfen



EOVE EO-150 Hi-Flow

VA-Materialnummer: 0402-0181
Hilfsmittelnummer: 14.24.08.0900

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-230V, 47-63Hz
- Leistungsaufnahme: max. 115 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Anwendungsteil vom Typ BF

Betriebsmodi:

- (A)VCV, (A)PCV, PSV, MPV, MPP, PSV VT, V-SIMV, P-SIMV, CPAP, ST, (A)PC, ST VT, ST, C-FLOW, Hi-Flow

Maße:

- Docking-Station: 1,6kg, 25x21x13 cm
- Beatmungsmodul: 1,8kg, 24,5x14,5x10 cm



Löwenstein prisma VENT50-C

VA-Materialnummer: 0402-0196
Hilfsmittelnummer: 14.24.08.0900

Besondere Merkmale:

- Neben der Beatmung im Leckagesystem wie bei prisma VENT30 und prisma VENT40 möglichen ist es mit dem prisma VENT50 jetzt auch möglich, das Einschlauchsystem mit Patientenventil zu verwenden. Hinzu kommen ein noch größerer Druckbereich bis 50 hPa, druck- und volumenkontrollierte Mundstückbeatmungsmodi (MPVp und MPVv) und LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver) zur Hustenunterstützung und zum Sekretmanagement.

Reinigung & Pflege:

- Wöchentlich Gerät und Atemschlauch reinigen.
- Monatlich Luftfilter reinigen und Pollenfilter ersetzen.
- Alle 6 Monate Luftfilter ersetzen.



Löwenstein prisma VENT50-C

VA-Materialnummer: 0402-0196
Hilfsmittelnummer: 14.24.08.0900

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Leistungsaufnahme: max. 120 W
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV, MPVp, MPVv, LIAM, Hi-Flow

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 21,8x21,8x17,5 cm
- Gewicht: 2,5kg



6

Absaugung

Absaugung

Geräteübersicht



AEROsuc Home 1&2

Easy Home 1: 0102-0069 - 01.24.01.1023

Easy Home 2: 0102-0070 - 01.24.02.1021



ProVisio M28

0402-0208 - 14.24.12.2009

HUM AEROsuc Easy Home 1 & 2

VA-Materialnummer Easy Home 1 Stationär: 0102-0069

Hilfsmittelnummer: 01.24.01.1023

VA-Materialnummer Easy Home 2 Mobil: 0102-0070

Hilfsmittelnummer: 01.24.02.1021

Besondere Merkmale:

- Die AEROsuc® - EASY Home 1 und EASY Home 2 sind medizinische, elektrisch betriebene Absaugpumpen, die sowohl in Gesundheitseinrichtungen (z.B. Krankenhaus) als auch in der häuslichen Pflege eingesetzt werden, um Sekrete und Flüssigkeiten aus den Atemwegen und Infektionsmaterial aus Wunden zu entfernen.

Reinigung & Pflege:

- Absauggefäß, Absaugverbindungsschlauch und die Silikonschläuche nach jeder Absauganwendung gründlich mit warmem Leitungswasser aus- bzw. Durchspülen.
- Das Gerätegehäuse muss bei jedem Patientenwechsel gereinigt und desinfiziert werden.



HUM AEROsuc Easy Home 1 & 2

VA-Materialnummer Easy Home 1 Stationär: 0102-0069

Hilfsmittelnummer: 01.24.01.1023

VA-Materialnummer Easy Home 2 Mobil: 0102-0070

Hilfsmittelnummer: 01.24.02.1021

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Saugleistung: 28 L/min
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- Stationär, Mobil

Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 17,5x21,3x36,4 cm
- Gewicht: Easy Home 1: 2,4kg, Easy Home 2: 2,6kg



Asskea proVisio M28

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0102-0068
Hilfsmittelnummer: 01.24.02.1026



Besondere Merkmale:

- Der revolutionäre proVisio® M28 ist ein Absauggerät der nächsten Generation. Er vereint technische Innovation mit einem anwenderorientierten Handling. Damit setzt er die Benchmark im Bereich Sekretabsaugung und gibt den Patienten ein neues Gefühl der Sicherheit.

Reinigung & Pflege:

- Bakterienfilter alle 2 Wochen wechseln.
- Wechseln Sie den Absaugbeutel „OneWay“ inklusive Absaugschlauch, wenn er voll ist, vor jedem Patientenwechsel oder spätestens wöchentlich.

Asskea proVisio M28

[Datenblatt](#)

VA-Materialnummer: 0102-0068
Hilfsmittelnummer: 01.24.02.1026



Stromversorgung

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Saugleistung: 30 L/min
- Elektrische Schutzklasse: II, Anwendungsteil vom Typ BF

Betriebsmodi

- 2 - 30 L/min

Maße

- Abmessungen (BxTxH): 26x12,4x21,3 cm
- Gewicht: 2,4kg

7

Monitoring

Monitoring

Geräteübersicht



**AEROcheck sat801
Coloured**

0702-0102 - 21.30.02.1010



AEROcheck sat805

0702-0105 - 21.30.02.1011



VitaGuard VG 3100/310

0902-0054 - 21.30.01.0005 /
0702-0103 - 21.30.02.1002



Kapnograph M880

0702-0109 - 21.30.02.1900

HUM AEROcheck sat801

VA-Materialnummer 0702-0102
Hilfsmittelnummer: 21.30.02.1010

Besondere Merkmale:

- Das AEROcheck® sat801 ist ein handliches Pulsoximeter mit bewährter Masimo SET® Technologie und brillanter TFT-Farbanzeige. Außer den üblichen Anzeigeparametern bekommt der Anwender gleichzeitig einen „Signal IQ“ sowie einen „Perfusionsindex“ angezeigt.

Reinigung und Pflege:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie die Netz- sowie die Patientenverbindung.
- Das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie für gröbere Verschmutzungen ein feuchtes Tuch mit einem handelsüblichen Allzweckreiniger.
- Lassen Sie das Gerät vor dem nächsten Wiedereinsatz vollständig abtrocknen.



HUM AEROcheck sat801

VA-Materialnummer 0702-0102
Hilfsmittelnummer: 21.30.02.1010

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Intern: Li-Ion Mn-Akku 2 x 3.6 V / 2 x 2250 mAh
- Elektrische Schutzklasse: II b

Akku-Betriebsdauer

- 22 Stunden garantiert (vollgeladen)

Maße:

- Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 46 mm
- Gewicht: 230 g



HUM AEROcheck sat805

VA-Materialnummer 0702-0105
Hilfsmittelnummer: 21.30.02.1011

Besondere Merkmale:

- Das AEROcheck® sat805 zeichnet sich durch einen vorbildlichen Bedienkomfort und umfassende Ausstattungsmerkmale wie Masimo SET® Technologie, großes Display, Multifunktionsdrehtaster, Perfusionsindex, Plethysmogramm, Signal IQ®, großer Datenspeicher und vielseitige Schnittstellen, (Fernalarm Schwesternruf, USB) für die einfache Integration in jeden Polysomnographie-Arbeitsplatz.

Reinigung und Pflege:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie die Netz- sowie die Patientenverbindung.
- Die Anwendungs-Hinweise des Desinfektionsmittel-Herstellers sind unbedingt zu beachten.
- Die Desinfektion erfolgt im Rahmen einer Oberflächenwischdesinfektion. Dazu wird das Desinfektionsmittel auf ein Einmal-Wischtuch verteilt und die zu desinfizierende Oberfläche des Pulsoximeters im Kreuzverfahren (2 x längs/2 x quer) abgewischt.



AEROcheck sat805

VA-Materialnummer 0702-0105
Hilfsmittelnummer: 21.30.02.1011

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Intern: LilonMn-Akku 7,2 V / mind. 3,6 Ah
- Elektrische Schutzklasse: II b

Akku-Betriebsdauer

- 20 Stunden garantiert
- 24 Stunden typisch

Maße:

- Abmessungen (L x B x H) 92 x 240 x 104 mm
- Gewicht: 900 g



VitaGuard 3100

VA-Materialnummer: 0902-0054
Hilfsmittelnummer: 21.30.01.0005

Besondere Merkmale:

- Herz-, Atmungs- und Sauerstoffmonitor
Monitor mit grafischer Anzeige zur Erkennung zentraler Apnoen und zur Überwachung der Herzrate und Sauerstoffsättigung

Reinigung & Pflege:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie die Netz- sowie die Patientenverbindung
- Das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie für größere Verschmutzungen ein feuchtes Tuch mit einem handelsüblichen Allzweckreiniger
- Lassen Sie das Gerät vor dem nächsten Wiedereinsatz vollständig abtrocknen



VitaGuard 3100

VA-Materialnummer 0902-0054
Hilfsmittelnummer: 21.30.01.0005

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Blockakku: NiMH/4,8V/2000mAh
- Einweg-Batterien: 4x1,5V (Typ LR6,AA), Alkaline

Akku-Betriebsdauer

- Mit SpO2 Überwachung mind. 8 Stunden
- Ohne SpO2 Überwachung mind. 2 Tage

Maße:

- Abmessungen (13,5 x 20,5 x 4,5) cm
- Gewicht: ca. 700g mit Blockakku



VitaGuard 310

VA-Materialnummer 0702-0103
Hilfsmittelnummer: 21.30.02.1002

Besondere Merkmale:

- Pulsoximeter
- Monitor mit grafischer Anzeige zur Überwachung der Sauerstoffsättigung und Pulsrate

Reinigung & Pflege:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie die Netz- sowie die Patientenverbindung.
- Das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
- Benutzen Sie für gröbere Verschmutzungen ein feuchtes Tuch mit einem handelsüblichen Allzweckreiniger.
- Lassen Sie das Gerät vor dem nächsten Wiedereinsatz vollständig abtrocknen



VitaGuard 310

VA-Materialnummer 0702-0103
Hilfsmittelnummer: 21.30.02.1002

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- Blockakku: NiMH/4,8V/2000mAh
- Einweg-Batterien: 4x1,5V (Typ LR6,AA), Alkaline

Akku-Betriebsdauer

- Mit Blockakku oder Einweg-Batterie mind. 8 Stunden

Maße:

- Abmessungen (13,5 x 20,5 x 4,5) cm
- Gewicht: ca. 700g mit Blockakku



BLT M880 Kapnograph

VA-Materialnummer: 0702-0109
Hilfsmittelnummer: 21.30.02.1900

Besondere Merkmale:

- Bei der Kapnographie wird zusätzlich zu den Zahlenwerten auch die zugehörige Kapnographiekurve dargestellt, wodurch eine genauere Bewertung der Messung ermöglicht wird.
- Der kleine und leichte Kapnograph Oxy-M880 für Erwachsene, Kinder und Pädiatrie arbeitet mit modernem Sidestream-Messverfahren.
- Das Gerät ist einfach über eine Touchscreen zu bedienen. Die CO₂ Messung wird über die Shortcut Taste an der Seite des Gerätes gestartet.
- Die Werte SpO₂, PR, EtCO₂ und AF (als RR angezeigt) werden auf dem großen Display sowohl graphisch als auch numerisch dargestellt.
- Zusätzlich werden die CO₂ Kurve und die SpO₂ Volumenkurve angezeigt. Um die Wertedarstellung zu vergrößern, können die SpO₂ oder CO₂-Werte separat betrachtet werden.

Reinigung & Pflege:

- Das Gehäuse und der Bildschirm des Monitors sollten staubfrei sein und können mit einem fusselfreien Tuch oder einem in Reinigungsmittel getauchten Schwamm abgewischt werden..



BLT M880 Kapnograph

VA-Materialnummer 0702-0109
Hilfsmittelnummer: 21.30.02.1900

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V
- Output: DC 5 V / 2 A
- Elektrische Schutzklasse: II b

Akku-Betriebsdauer

- >18 Stunden

Maße:

- Abmessungen (L x B x H) 142 x 78 x 36 mm
- Gewicht: 500 g (inkl. Akku)



8

Sekretmanagement

Hustenassistenten

Geräteübersicht



CoughAssist E-70

7002-0003 - 14.24.08.3003

CoughAssist E70

VA-Materialnummer: 7002-0003
Hilfsmittelnummer: 14.24.08.3003

Besondere Merkmale:

- Cough-Trak als Inspirationstrigger für den Patienten
- Oszillation, um die Sekrete zu lösen und zu mobilisieren
- Drei verschiedene Voreinstellungen für verschieden Krankheitsbilder verfügbar

Reinigung & Pflege:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und reinigen Sie das vordere Bedienfeld und das Äußere des Gehäuses nach Bedarf mit einem der folgenden Reinigungsmittel:
 - a. Mit Wasser angefeuchtetes Tuch und mildes Reinigungsmittel
 - b. Isopropanol, 70 %
 - c. DisCide-Tücher
 - d. Chlorbleiche, 10 %
- Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie das Netzkabel anschließen.



CoughAssist E70

VA-Materialnummer: 7002-0003
Hilfsmittelnummer: 14.24.08.3003

Stromversorgung:

- Netzspannung: 100-240V, 50-60Hz
- 12 V Gleichstrom 8,3A
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- Manuell
- Auto

Maße:

- Abmessungen (BxHxT): 29,2cm x 23,1cm x 19,0cm
- Gewicht: 3,8 kg (ohne abnehmbare Batterie)
4,3 kg (mit installierter abnehmbarer Batterie)



9

Inhalation

Geräte zur Inhalation bei Spontanatmung

Geräteübersicht



Pocket Air

0602-0096 - 14.24.01.0176



InnoSpire Elegance

0602-0090- 14.24.01.0900

Pocket Air

VA-Materialnummer: 0602-0096
Hilfsmittelnummer: 14.24.01.0176

[Datenblatt](#)

Besondere Merkmale:

Verwendung möglich mit:

- Mundstück
- Maske
- Trachealmaske

Vorteile:

Die Verneblung findet lautlos statt.
Netzbetrieb, AA-Batterien oder
AA-NiMH-Akkus möglich

Für alle zur Verneblung zugelassenen Medikamente (auch Antibiotika und hypotones NaCl)

Reinigung & Pflege:

- Säubern Sie den Vernebler nach jeder Inhalation
- Schütten Sie die verbliebene Lösung aus dem Behälter
- Füllen Sie etwas destilliertes Wasser in den Behälter
- Schalten Sie das Gerät ein und vernebeln das Wasser für 1-2 Minuten
- Entfernen Sie den Behälter von der Haupteinheit
- Waschen und Spülen Sie den Behälter mit destilliertem Wasser
- Lassen Sie den Behälter an der Luft trocknen



Pocket Air

VA-Materialnummer: 0602-0096
Hilfsmittelnummer: 14.24.01.0176

[Datenblatt](#)

Stromversorgung:

- Stromverbrauch 1,5 W
- 2x AA Alkaline Batterien
- 2x wiederaufladbare NiMH-Batterien
- Stromversorgungskabel

Betriebsmodi:

- Active Vibrating Mesh Technology (schwingende Membran)

Maße:

- Abmessungen (LxWxH): 78mm x 41mm x 73mm
- Gewicht: 74g



InnoSpire Elegance

VA-Materialnummer: 0602-0090
Hilfsmittelnummer: 14.24.01.0900

Besondere Merkmale:

- Der InnoSpire Elegance ist abgestimmt auf den wiederverwendbaren SideStream- Vernebler, der nachweislich konstant ein hochwertiges Aerosol abgibt. Sie können sich darauf verlassen, dass die Patienten über die gesamte Lebensdauer des Verneblers hinweg Aerosol von hoher Qualität erhalten.

Reinigung & Pflege:

- Reinigung von Kompressor, Vernebler und Zubehörteilen
Die Außenseite des Kompressors mindestens einmal im Monat mit einem feuchten Tuch abwischen. Anweisungen zur Reinigung von Zubehör und Vernebler finden Sie in der Bedienungsanleitung für den Vernebler und das Zubehör.



InnoSpire Elegance

VA-Materialnummer: 0602-0090
Hilfsmittelnummer: 14.24.01.0900

Stromversorgung:

- Netzspannung: 220 V/60 Hz, 1,2 A
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- Max. Durchfluss 9,3 l/min

Maße:

- Abmessungen 165 x 165 x 108 mm
- Gewicht: 1,5 kg



10

Inhalation auch
unter Beatmung
geeignet

Geräte zur Inhalation bei Spontanatmung

Geräteübersicht



Multisonic pro

0602-0042 - 14.24.01.0049



Aerogen Pro

0405-0055- 14.24.01.5900

Multisonic pro

VA-Materialnummer: 0602-0042
Hilfsmittelnummer: 14.24.01.0049

Besondere Merkmale:

- Bei allen Beatmungsgeräten einsetzbar (Kompatibilitätserklärungen für diverse Beatmungsgeräte liegen vor.)
- Automatisches Abschalten nach Verbrauch des Medikaments
- Auch in der Spontaninhalation einsetzbar („Weaning“)
- Fassungsvermögen 5ml (3ml mit Medikamenteneinsatz)


Reinigung & Pflege:

- Wegen möglicher Schädigung der Materialien eignen sich keine Präparate auf der Basis von halogen- oder sauerstoffabspaltenden Verbindungen, alkoholhaltigen Verbindungen oder starken organischen Säuren! Wichtig! Keine Lösungsmittel wie Aceton, Alkohol, Benzin oder ähnliche verwenden
- Den Handapparat und die Zubehörteile Verneblerkopf, Dichtring, Luer/Lock-Verschlusskappe und ggf. T-Stück mit Ausatemventil und Ventiladapter mit Einatemventil unter fließend warmen Wasser (ca. 40°C, Trinkwasserqualität) auswaschen. Verwenden Sie ein handelsübliches, flüssiges Geschirrspülmittel.



Inhalationsbehandlung von Tracheostoma-Patienten

Anwendung des T-Stücks, des Ausatemfilters und der Gänsegeißel

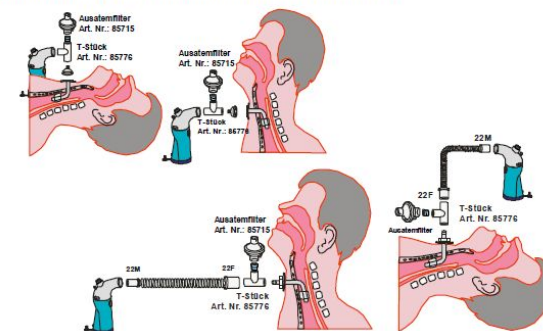

Multisonic pro

VA-Materialnummer: 0602-0042
Hilfsmittelnummer: 14.24.01.0049

Stromversorgung:

- Stromverbrauch: AC 100 – 240 V / DC 12 V
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- Ultraschall-Zerstäubung

Maße:

- Abmessungen (BxHxT): 6,3cm x 22cm x 17cm
- 0,6 kg Handapparat und Netzteil



Aerogen Pro

VA-Materialnummer: 0405-0055
Hilfsmittelnummer: 14.24.01.5900

Besondere Merkmale:

- Hat keinen Einfluss auf die Beatmung während der Inhalation oder beim Nachfüllen
- Arbeitet im Schlauchsystem oder als Handgerät
- Einsetzbar vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen
- Kompatibel mit allen Standardschlauchsystemen und Beatmungsgeräten
- Anwendbar in der Klinik, während des Krankentransports, im Homecare-Bereich oder in der Praxis
- Fassungsvermögen 10ml

Reinigung & Pflege:

- Sicherstellen das sich kein Medikament mehr im Gerät befindet
- Die Verneblereinheit vom T-Stück trennen. Den Einfülldeckel von der Verneblereinheit abnehmen
- Alle Teile mit Warmen Wasser und einem milden flüssigen Reinigungsmittel unter Befolgung geltender Krankenhausprotokolle reinigen



Aerogen Pro

VA-Materialnummer: 0405-0055
Hilfsmittelnummer: 14.24.01.5900

Stromversorgung:

- Stromquelle: AC 100 – 240 V 50-60 Hz
- Stromverbrauch: <6,5 Watt (Ladevorgang)
- Stromverbrauch: <2,0 Watt (Vernebelung)
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- OnQ Aerosol-Erzeuger

Maße:

- Abmessungen Verneblereinheit (HxBxT): 33mm x 75mm x 131mm
- Abmessung Steuereinheit (HxBxT):
- Gewicht: 25g Verneblereinheit
- Gewicht: 230g Steuermodul



11

Aktive Befeuchtung

Geräte zur aktiven Befeuchtung

Geräteübersicht



prismaVENT Aqua Basic

0602-0042 - 14.24.17.4001



prismaVENT Aqua

0405-0055- 14.24.17.4001



AIRcon Gen2

0405-0055- 14.24.17.6002



prismaVENT Aqua Basic

VA-Materialnummer: 0202-0088
Hilfsmittelnummer: 14.24.17.4001

[Datenblatt](#)

Besondere Merkmale:

- Drei Befeuchterstufen, Kontrollanzeige und intuitives Alarmmanagement
- Von der kontinuierlichen Überdruckbeatmung (Schlafapnoe) bis zur intensiven Atemunterstützung in der Klinik
- Sensor Ambient Temperature Sensing Technologie
- Einsetzbar mit verschiedenen nicht-invasiven Beatmungsgeräten
- Automatische Funktionserkennung bei Anwendungsstart
- Betrieb nur im NHW (Non Heatet Wire) Modus möglich

Reinigung & Pflege:

- Betrieb nur im NHW (Non Heatet Wire) Modus möglich
- Grundgerät wöchentlich oder bei Patientenwechsel reinigen.
- Mit einem milden Reinigungsmittel reinigen.
- Es ist darauf zu achten, dass lediglich ein feuchtes Tuch für die Reinigung verwendet werden soll! Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.



prismaVENT Aqua Basic

VA-Materialnummer: 0202-0088
Hilfsmittelnummer: 14.24.17.4001

[Datenblatt](#)

Stromversorgung:

- Stromverbrauch: 220 – 240 V 50-60 Hz
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- Nur NHW (Non Heated Wire)

Maße:

- Abmessungen (HxBxT): 142mm x 150mm x 200mm
- Gewicht: 2,3 kg



prismaVENT Aqua

VA-Materialnummer: 0202-0087
Hilfsmittelnummer: 14.24.17.4001

[Datenblatt](#)

Besondere Merkmale:

- Drei Befeuchterstufen, Kontrollanzeige und intuitives Alarmmanagement
- Von der kontinuierlichen Überdruckbeatmung (Schlafapnoe) bis zur intensiven Atemunterstützung in der Klinik
- Sensor Ambient Temperature Sensing Technologie
- Einsetzbar mit verschiedenen Therapiegeräten (z.B. Beatmungsgeräten, Bilevel-, CPAP-Geräten u.a.m.)
- Automatische Funktionserkennung bei Anwendungsstart
- Schlauchheizung nur im Inspirationsschenkel (Doppelschlauchsystem)

Reinigung & Pflege:

- Grundgerät wöchentlich oder bei Patientenwechsel reinigen.
- Mit einem milden Reinigungsmittel reinigen.
- Es ist darauf zu achten, dass lediglich ein feuchtes Tuch für die Reinigung verwendet werden soll! Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.



prismaVENT Aqua

VA-Materialnummer: 0202-0087
Hilfsmittelnummer: 14.24.17.4001

[Datenblatt](#)

Stromversorgung:

- Stromverbrauch: 220 – 240 V 50-60 Hz
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- NHW (Non Heated Wire) ohne Heizdraht und ohne Temperatursonde
- HWC (Heated Wire Calculated) mit Heizdraht aber ohne Temperatursonde
- HWT (Heated Wire Temperature) mit Heizdraht und mit Temperatursonde

Maße:

- Abmessungen (HxBxT): 142mm x 150mm x 200mm
- Gewicht: 2,3 kg



AIRcon Gen2

VA-Materialnummer: 0202-0086
Hilfsmittelnummer: 14.24.17.6002

Besondere Merkmale:

- Drei Betriebsmodi (IV, NIV, Free)
- Einsatz im Klinischen und Außerklinischen Bereich
- Automatische Kammererkennung
- Wasserfüllstandserkennung
- Individuelle Steuerung des expiratorischen Heitzdrahts
- Automatische und Manuelle Leistungseinstellung
- Einstellung der Befeuchterleistung in drei Stufen

Reinigung & Pflege:

- Grundgerät wöchentlich oder bei Patientenwechsel reinigen
- Mit einem milden Reinigungsmittel reinigen
- Es ist darauf zu achten, dass lediglich ein feuchtes Tuch für die Reinigung verwendet werden soll! Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen



AIRcon Gen2

VA-Materialnummer: 0202-0086
Hilfsmittelnummer: 14.24.17.6002

Stromversorgung:

- Stromverbrauch: 220 – 240 V 50-60 Hz
- Elektrische Schutzklasse: II, Typ BF

Betriebsmodi:

- NHW (Non Heated Wire) ohne Heizdraht und ohne Temperatursonde
- HWC (Heated Wire Calculated) mit Heizdraht aber ohne Temperatursonde
- HWT (Heated Wire Temperature) mit Heizdraht und mit Temperatursonde

Maße:

- Abmessungen (HxBxT): 170mm x 145mm x 200mm
- Gewicht: 2,3 kg



Rundum gut versorgt - **VitalAire**

