

VITAL360 CPAP

&

VITAL360 APAP

**Schlaftherapie-Geräte
der neuesten Generation!**

Die innovativen und intuitiv zu bedienenden
Schlaftherapie-Geräte bieten optimalen
Patientenkomfort.

NEU!




360°-SERVICE

Neue Wege in der Patientenbetreuung

VITAL360 CPAP

&

VITAL360 APAP

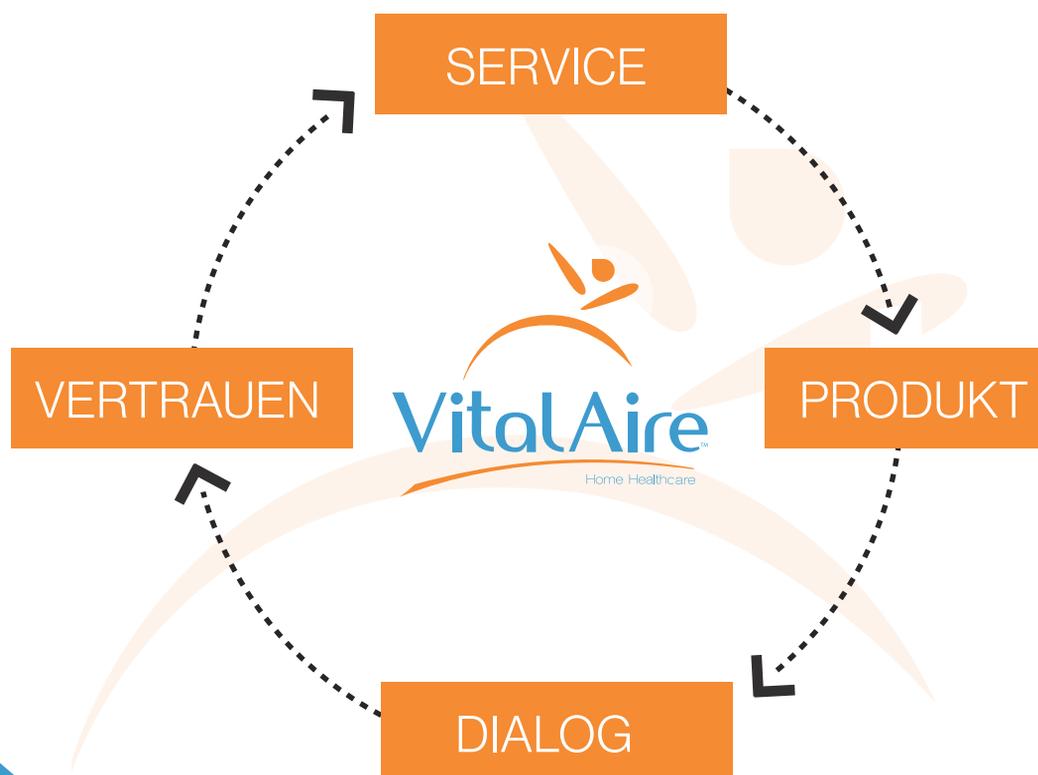

VITALAIRE GANZHEITLICH AM PATIENTEN

SERVICE

Die Grundlage für eine erfolgreiche Therapieanwendung ist ein umfassendes Service-Angebot – zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Patienten in der Heimtherapie. Dank jahrzehntelanger Erfahrung ist unser Leistungsspektrum ideal an die Bedürfnisse unserer Patienten angepasst.

PRODUKT

Moderne und leistungsfähige Produkte machen die Therapieanwendung für Patienten besonders einfach. Die neuen Vital360-Geräte sind mit dem modernen Funktionsumfang einer der Schlüsselsteine des Therapieerfolgs.

DIALOG

Die Erweiterung unseres Produktportfolios um das Polygraphie-Gerät VitalNight und das nun neue Vital360-Gerät ermöglicht es uns, einen noch intensiveren und stringenteren Austausch mit unseren Patienten und Kunden zu führen und so die Betreuung nachhaltig zu optimieren.

VERTRAUEN

Ein intensiver Austausch ist für uns die Basis für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Patienten und Kunden.

ERHOLSAMER SCHLAF

VITAL360 CPAP / VITAL360 APAP

die innovativen Schlaftherapie-Geräte

Mit Vital360 CPAP und Vital 360 APAP bieten wir moderne und zuverlässige Schlaftherapie-Geräte dank integrierter Konnektivität, präziser Ereigniserkennung und hohem Patientenkomfort. Für noch mehr Komfort und das Wohlbefinden für Patienten und deren Partner wurden die Geräte so entwickelt, dass sie extrem leise laufen.

Das garantiert eine erholsame Nacht – nicht nur für den Patienten, sondern auch für den Partner.

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an! Gern stehen Ihnen unsere Fachleute von VitalAire für weitere Informationen zur Verfügung.

STARKE ARGUMENTE AUF EINEN BLICK

- Zwei Dynamik-Optionen zur Druckanpassung im APAP-Modus
- Tiefschlafindikator zur Bewertung der Schlafqualität
- Zahlreiche Komfortfunktionen, mit denen man Einstellungen automatisieren kann
- Erkennen von periodischer Atmung, RERA, Schnarchen, Hypopnoen, Apnoen und Flusslimitationen
- Zuverlässige Differenzierung in obstruktive und zentrale Apnoen dank FOT (Forced Oscillatory Technique)



Befeuchter

Als Zubehör bestellbar ist ein moderner Befeuchter, der sich problemlos an das Gerät anschließen lässt.

MIT NEUESTER TECHNIK



Modernes Design

Das kompakte Gerät zeichnet sich durch ein modernes Design aus in eleganter Schwarz/Weiß-Optik.

Hightech inklusive

Mit modernster digitaler Technik vernetzt – somit auf dem neuesten Stand in der Schlaftherapie.

NEU!



Tiefschlaf-Indikator

Der Tiefschlaf des Patienten wird mit dem Gerät zusätzlich bewertet.

VITAL360 CPAP

&

VITAL360 APAP

TECHNISCHE DATEN



VITAL360 CPAP / VITAL360 APAP Schlaftherapie-Geräte

ALLGEMEINES

Gewicht	ca. 1,34 kg
Abmessungen (BxHxT)	170 x 135 x 180 mm
Stromaufnahme	Betrieb (Therapie): 240 V = 0,16 A, 100 V = 0,36 A Bereitschaft (Standby): 240 V = 0,035 A, 100 V = 0,061 A
Schalldruck	ca. 26,5 dB(A) bei 10 hPa
Hersteller	Löwenstein Medical, DE

ZUBEHÖR

Leckageschlauch	15 mm, 22 mm
Befeuchter Vital360	400 ml

BETRIEBSMODI

CPAP & APAP Betriebsdruckbereich	4 bis 20 hPa
softSTART	einstellbar 5 bis 45 min

ARTIKELNUMMER

Vital360 CPAP	0502-0255
Vital360 APAP	0502-0256

KONTAKT

Nehmen Sie jederzeit Kontakt mit uns auf, um alle Fragen rund um die neuen Vital360-Geräte, Ihre Therapie oder weitere Anliegen zu beantworten.

Weitere Infos:

www.vitalaire.de/de/vital-360



Hinterlassen Sie uns
Ihre Kontaktdaten.

Wir vereinbaren gern
einen Beratungs-
Termin mit Ihnen.



Sie erreichen uns jederzeit deutschlandweit
gebührenfrei von 8 bis 17 Uhr unter:

Service-Tel. 0800 / 251 11 11

Service-Fax 0800 / 202 02 02

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de